

ULTRALIGN+ LSO/TLSO

ULTRALIGN+ OLS/OTLS

Non-tapered	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Xyphoid	31"-35"	34"-38"	37"-41"	38"-45"	45"-53"
Waist	31"-35"	32"-38"	38"-41"	38"-45"	45"-53"
Trochanter	31"-35"	34"-39"	38"-42"	38"-45"	45"-53"

Tapered	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Xyphoid	25"-31"	28"-35"	32"-38"	35"-42"	40"-46"
Waist	25"-31"	29"-36"	32"-38"	36"-42"	39"-47"
Trochanter	27"-33"	32"-38"	35"-41"	38"-46"	43"-49"

No cónica	Pequeña	Mediana	Grande	Extra Grande	2-extra grande
Xifoides	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Cintura	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Trocanter	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm

Cónica	Pequeña	Mediana	Grande	Extra Grande	2-extra grande
Xifoides	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Cintura	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Trocanter	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Non-conique	Petit	Moyen	Grand	Très Grand	Très Très Grand
Xiphoid	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Taille	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Trochanter	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm

Conique	Petit	Moyen	Grand	Très Grand	Très Très Grand
Xiphoid	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	102 - 117 cm
Taille	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Trochanter	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Nicht-tailiert	Klein	Mittel	Groß	Extragroß	Sehr groß
Schwertfortsatz	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Taille	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Rollhügel	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm

Tailiert	Klein	Mittel	Groß	Extragroß	Sehr groß
Schwertfortsatz	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Taille	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Rollhügel	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Não	Afunilado	Pequeno	Médio	Grande	Extra Grande	Extra-Extra Grande
Schwertfortsatz	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm	
Taille	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm	
Rollhügel	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm	

Afunilado	Pequeno	Médio	Grande	Extra Grande	Extra-Extra Grande
Schwertfortsatz	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Taille	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Rollhügel	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Mη κυκλικό σύγχρονο	Mη αφυπνιζόμενο	Μικρό	Μέσο	Μεγάλο	Πολύ μεγάλο πρώτο
Σπασμός	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Τροχογνήση	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Μη κυκλικό σύγχρονο	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Τροχογνήση	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΑΦΥΠΝΙΖΟΜΕΝΟ	ΜΙΚΡΟ	ΜΕΣΟ	ΜΕΓΑΛΟ	ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΩΤΟ
Σπασμός	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Τροχογνήση	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Αφυπνιζόμενο	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Τροχογνήση	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

ULTRALIGN®+ LSO/TLSO
SINGLE PATIENT USE
NON-Sterile

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
RX ONLY
FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE
TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER
OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED
PRACTITIONER.

IMPORTANT INFORMATION
Please read all warning and instructions before use. Correct application is required for proper product and to reduce the risk of injury or re-injury inherent with the use of any brace.

INTENDED USE
Used for neutral sagittal alignment, hyperextension or flexion bracing using a thoracic or regular lumbar sacral orthosis with or without lumbar extension straps or sternal pad if used. Non-tapered versions to ensure proper fit.

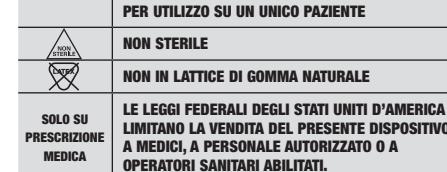
INDICATIONS
Postoperative fusion, postoperative laminectomy, postoperative discectomy (neutral sagittal alignment; compression fractures, degenerative disc disease, spondolisthesis, osteoporosis, chronic low back pain); BET procedure (hyperextension); spinal stenosis, spinal arachnoiditis and facet syndrome.

CAUTIONS
• A physician or properly licensed practitioner ("prescriber") who is familiar with the use and purpose of this brace is to use this brace. Other healthcare practitioners are to provide written instructions and risks related to the use of this brace to other healthcare practitioners treating the users and the users themselves, including duration of use. The instructions provided in this sheet do not supersede hospital or physician specific orders of the prescriber.

• Inspect product for damage or defects before use. Correct application is required for proper product and to reduce the risk of injury or re-injury inherent with the use of any brace.

• Inspect product for sharp edges or irregular surfaces before use. Correct application is required for proper product and to reduce the risk of injury or re-injury inherent with the use of any brace.

• Inspect product for sharp edges or irregular surfaces before use. Correct application is required for proper product and to reduce the risk of injury or re-injury inherent with the use of any brace.

ULTRALIGN®+ LSO/TLSO


PER UTILIZZARE SU UN UNICO PACIENTE

NON STERILE

NON IN LATICE DI GOMMA NATURALE

 LE LEGGI FEDERALI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
LIMITANO LA VENDITA DEL PRESENTE DISPOSITIVO
A MEDICI, A PERSONALE AUTORIZATO O A
OPERATORI SANITARI ABILITATI.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
 Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni prima dell'uso. La corretta applicazione è fondamentale per il perfetto funzionamento del prodotto e per ridurre il rischio di lesione o recidiva della lesione correlata all'uso di un tutore.

USO PREVISTO
 DeRoyal Industries consiglia l'uso futuro per allineamento sagittale neutro, iperestensione o flessione con un torace brachio o lombosacrale standard con fascia di estensione dorsolombare o kit di imbottitura sternale. Le versioni affusolate e non affusolate garantiscono un applicazione ottimale.

INDICAZIONI
 Fusione postoperatoria, laminectomia postoperatoria, discectomia postoperatoria (allineamento sagittale neutro); fratture da compressione, discolistosi degenerativa, osteoporosi, lombalgia cronica; procedura IDET (iperestensione); spondilolistesi, spondilosi, stenosi spinale, procedura spinale e sindrome delle facette articolari (fissione).

Questa linea deve essere applicata all'utilizzo di un medico o di un operatore sanitario autorizzato che ne conosce l'utilizzo e la finalità. Il prenotatore ha il dovere di fornire istruzioni per l'indossare il prodotto se i suoi richiesti comitati all'uso di questo futuro ad altri operatori sanitari che hanno cura gli utilizzatori e agli utilizzatori stessi, compresa la durata di utilizzo. Le istruzioni fornite in questo foglio non sostituiscono il protocollo ospedaliero o le indicazioni dirette del prenotatore.

Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti danni e/o componenti malfunzionanti.

Verificare che il tutore sia attillato perfettamente al paziente. **NON STRINGERE ESSCESSIVAMENTE.**

L'uso di questo dispositivo può provocare ustioni muscolari nell'utilizzatore. Rivolgersi immediatamente al prenotatore se si riscontrano cambiamenti, reazioni infiammatorie o dolore prolungato durante l'impiego di questo futuro.

Questo dispositivo è destinato all'uso su singoli pazienti. **NON RICUTLARLO.** Il ricuttolato, il reprocessaggio o la sterilizzazione potrebbero danneggiare il dispositivo e comportare lesioni per l'utente o il paziente, oppure infiammazione e decollo del paziente.

ISTRUZIONI PER L'USO
INDOSSE UNA MAGLIETTA SOTTO QUESTO TUTORE.
 Per proteggere il paziente quando indossa la schiena, il paziente deve essere aiutato a mettere una maglietta sopra la schiena, una volta che il tuteore è stato applicato.

1. La prima fase riguarda il posizionamento di un lenzuolo sotto il paziente mentre questi si trova ancora in posizione supina. Piegare un lenzuolo a una larghezza di 90 - 100 cm e farlo scivolare sotto l'area lombare e anche del paziente. La larghezza del lenzuolo deve andare dalla cintura del petto appena sotto il gomito.

2. Per proteggere il paziente dal calore, tenere il lenzuolo in posizione mantenendo il ginocchio sinistro piegato a 90°. Posizionare il braccio destro sulla testa con il gomito diritto vicino all'orecchio destro. Appoggiare la mano sinistra sull'addome.

3. Chiedere al paziente di mantenere questa posizione mentre si utilizza il lenzuolo per girare il paziente sul fianco. Le mani del paziente devono rimanere alle spalle, mentre il braccio sinistro deve essere ruotato verso l'alto. Ricoprire la spalla destra con un ampio plaid e acciuffare il braccio in posizione di riposo. Recuperare la spalla sinistra e posizionarla sotto il braccio destro.

4. Per girare il paziente sul fianco destro, afferrare il lenzuolo del paziente situato sul lato sinistro del paziente passando le braccia al di sopra del paziente. Dopo aver controllato fino a tirare il lenzuolo verso il di fuori girare il paziente sul fianco destro. Tirare il lenzuolo lentamente, controllando che il paziente non manifesti disagio ed evitando la rotazione della spina dorsale. Posizionare uno o due cuscini tra le ginocchia del paziente quando questi si trova sdraiato sul fianco.

PER IL POSIZIONAMENTO DELL'ESTENSORIS

1. Controllare il posizionamento dei pannelli anteriore e posteriore, accertandosi che l'ortese si trovi sulla linea mediale rispetto alla spina dorsale e che non si sia spostata in alto o in basso.

ACCESORI LSO
APPLICAZIONE DELL'ESTENSIONE DORSO-LOMBARE (DLE)

1. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, consultare le istruzioni per l'applicazione di LSO/TLSO al paziente fino al punto 2. Prima di ruotare il paziente in posizione supina, fissare la PTE come mostrato nella Figura 2. Una distesa anatomica deve essere fatta al di sopra del cuscino, e la fascia superiore deve essere sollevata dalla scapola. Se si usa un TLSO, la parte superiore si trova sotto l'angolo della scapola.

2. Il paziente deve quindi essere girato in posizione supina. Seguire le stesse procedure riportate nel paragrafo precedente.

3. Stendere le fascie di chiusura laterali su ciascun lato del pannello posteriore.

4. Fissare le fascie di chiusura laterali al pannello posteriore, e anche parallelamente alle spalle. Tagliare i fili di cuscino del paziente piegati e le anche parallele alle spalle.

5. Stendere le fascie di chiusura laterali sul pannello posteriore.

6. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

7. Iniziando con le due fasce inferiori, tenere la fascia in avanti. Ripetere l'applicazione con le due fasce superiori. Dopo aver verificato che la fascia anteriore si trovi in posizione corretta, è possibile ripetere la procedura di tensionamento delle fasce applicando una lieve pressione verso il basso sul pannello. È più facile garantire la corretta aderenza tirando le fasce inferiori e fissandole. Formare una "V" e tirando le fasce anteriori verso il basso, come mostrato nella Figura 3b. Posizionare la fascia anteriore in posizione corretta, e assicurare l'intera trazione verso il basso prima di fissare l'imbottitura sternale nel pannello anteriore. Posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

8. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

9. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

10. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

11. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

12. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

13. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

14. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

15. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

16. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

17. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

18. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

19. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

20. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

21. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

22. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

23. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

24. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

25. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

26. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

27. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

28. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

29. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

30. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

31. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

32. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

33. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

34. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

35. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

36. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

37. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

38. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

39. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

40. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

41. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

42. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

43. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

44. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

45. Per utilizzare l'estensione dorso-lombare, posizionare le fascie della PTE sopra le spalle, passare attraverso l'orecchio e fissare alla chiusura a strappo rimovibile su entrambi i lati come mostrato la Figura 3a. Una volta posizionata la PTE, tendere le quattro fascie che avevano allentato per consentire l'applicazione del SPK. Tendere anche le fascie della PTE e tagliare la parte in eccesso.

46. Se le fasce si sovrappongono notevolmente e non hanno la stessa lunghezza dopo avere regolato su entrambi i lati, regolare il resto del tutore in modo che il paziente senta più piaciuto.

47