

ADHESIVE DRESSINGS

1. Peel the paper liner from the back of the adhesive dressing.
2. Center the contact layer over the wound.
3. Anchor exposed edge of dressing adhesive onto skin, then carefully peel off rest of release paper.
4. Smooth all adhesive edges onto skin.

5. Change dressing as needed when wet, soiled, leaking, or as directed by a licensed practitioner.
6. To remove the dressing, hold the edge of the adhesive border and carefully pull it in the direction of hair growth, lifting bandage from the wound.
7. Dispose of the soiled dressing.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

Store at room temperature and avoid excessive heat and humidity.

	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT
	KEEP DRY

WARRANTY

DEROYAL® PRODUCTS ARE WARRANTED FOR NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF SHIPMENT FROM DEROYAL AS TO PRODUCT QUALITY AND WORKMANSHIP. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**



Manufacturer:
DeRoyal Industries, Inc.
200 DeBusk Lane
Powell, TN 37849 USA
888.938.7828 or 865.938.7828
www.deroyal.com

Part#4-7077

Revised 7/18

©2018 DeRoyal Industries, Inc.
All Rights Reserved. DeRoyal, the DeRoyal logo, Improving Care. Improving Business. and Covaderm are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc.

COVADERM® AG COMPOSITE WOUND DRESSING

	DO NOT REUSE
	STERILIZED WITH ETHYLENE OXIDE
	NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
RX ONLY	FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.

IMPORTANT INFORMATION

 Please read all warnings and instructions before use. Correct application is essential for proper product function and to reduce the risk of injury or infection.

INTENDED USE


DeRoyal® Covaderm® Ag silver alginate wound dressings are intended to manage abrasions and lacerations, dermal wounds, donor sites, first- and second-degree burns, surgical incisions, vascular access sites, pressure ulcers stage I-IV, stasis ulcers, and venous ulcers.

CONTRAINDICATIONS

- Do not surgically implant.
- Do not use on:
 - Third degree burns.
 - Ulcers resulting from infections.
 - Lesions in patients with active vasculitis.
 - Patients with sensitivity to silver, silver compounds, or alginates.

WARNINGS

- Read and understand all warnings, cautions, and directions completely and carefully before use. Failure to do so may result in injury.
- Do not reuse, reprocess, or re-sterilize this dressing. This device is for single use only. Reuse, reprocessing, or re-sterilization may damage the dressing, and may result in injury or infection.
- Do not use if the individual package is opened or if the package or the dressing is damaged. Carefully inspect the dressing for damage or defects prior to use.
- Seek medical attention if your wound is more severe than a minor abrasion, minor laceration, or minor scald and burn. Also seek medical attention if you have signs of an infection or allergic reaction such as fever, redness, pain, or swelling.

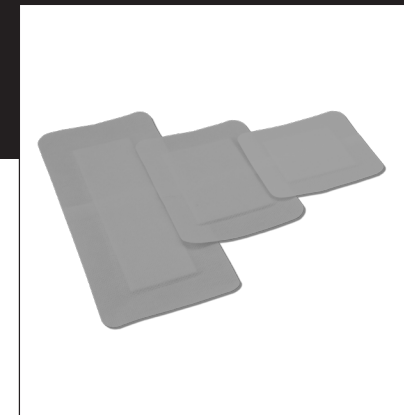

- If you have any signs of an allergic reaction, discontinue using the dressing and rinse the wound and surrounding skin and contact the prescriber.
- Ensure the dressing adheres to skin.
- If dressing is ineffective or does not absorb, discard and replace.
- Dispose of all used dressings with care to avoid exposure to or contamination with biohazard.
- Ensure dressing components are not left in wound upon removal.

LOCAL WOUND CARE CAN NOT OVERCOME THE DEFICITS OF UNRELIEVED MALNUTRITION, PRESSURE, TRAUMA OR COMPROMISED BLOOD FLOW. INSTITUTE INTERVENTIONS TO REDUCE OR RELIEVE FACTORS THAT CONTRIBUTE TO IMPAIRED WOUND HEALING IN ORDER TO ACHIEVE THE OPTIMUM OUTCOMES.

CAUTIONS

- Ensure the dressing fully covers your wound.
- If the dressing rips or tears prior to or during application, discard the torn dressing and replace it.
- Prior to removal, ensure the dressing has not adhered to the wound. If the dressing has adhered to the wound or skin, rinse with water or saline solution to loosen.

DIRECTIONS FOR USE

1. Carefully read the **WARNINGS** and **CAUTIONS** prior to use.
2. Clean the wound of excess drainage and fluid, and thoroughly dry skin around the wound.
3. Open the dressing package.

APÓSITO PARA HERIDAS COMPUUESTO COVADERM® AG

	NO REUTILIZAR
STERILE/EO	ESTERILIZADA CON ÓXIDO DE ETILENO
	NO REALIZADA CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL
SOLO BAJO PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA	LA LEY FEDERAL DE EE. UU. EXIGE LA PRESENTACIÓN DE UNA PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO O PROFESIONAL SANITARIO AUTORIZADO PARA EL USO Y LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 Lea todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto. Es esencial aplicarlo correctamente para que funcione de forma adecuada y para reducir el riesgo de lesiones o de infección.

USO PREVISTO

Los apósitos para heridas con alginato de plata Covaderm® Ag DeRoyal® están indicados para el tratamiento de excoiaciones y laceraciones, heridas cutáneas, puntos de donación, quemaduras de primer y segundo grado, incisiones quirúrgicas, puntos de acceso vascular, úlceras de decúbito (fases I-IV), úlceras varicosas y úlceras venosas.

CONTRAINDICACIONES

- No apto para la implantación quirúrgica
- No usar en:
 - Quemaduras de tercer grado
 - Úlceras provocadas por infecciones
 - Lesiones en pacientes con vasculitis activa
 - Pacientes con hipersensibilidad a la plata, los compuestos de plata o los alginatos

ADVERTENCIAS

- Antes de usar el producto, lea con atención todas las advertencias, precauciones e instrucciones y asegúrese de haberlas comprendido plenamente. La inobservancia de esta advertencia puede provocar lesiones.
- No vuelva a utilizar, procesar o esterilizar este apósito. Este producto sanitario es de un solo uso. Su reutilización, reprocesamiento o reesterilización puede dañar el apósito y provocar lesiones e infecciones.
- No use el producto si el envase individual está abierto o si se notan daños en el mismo o en el apósito. Antes del uso, compruebe atentamente que el apósito no presente daños o defectos.
- Solicite atención médica si su excoiación, laceración, escaldadura o quemadura no es leve sino de mayor gravedad. Recorra a un médico también en caso de síntomas de infección o reacción alérgica, como por ejemplo fiebre, enrojecimiento, dolor o inflamación.
- Si tiene algún síntoma de reacción alérgica, deje de usar el apósito, enjuague la herida y la piel circundante y póngase en contacto con el médico prescriptor.
- Cerciórese de que el apósito se adhiera bien a la piel.
- Si el apósito no es eficaz o no absorbe, es necesario desecharlo y cambiarlo por otro.
- Deseche todos los apósitos usados, teniendo cuidado de evitar la exposición o contaminación causada por residuos con riesgo biológico.
- Cerciórese de que no quede ningún resto del apósito en la herida después de retirarlo.

EL TRATAMIENTO LOCALIZADO DE LAS HERIDAS NO PUEDE SUPLIR LAS CARENCIAS DEBIDAS A LA MALNUTRICIÓN NO TRATADA, LA PRESIÓN, LOS TRAUMATISMOS O EL FLUJO SANGUÍNEO DEFICIENTE. PARA OBTENER UN RESULTADO ÓPTIMO, SE DEBERÁ INTERVENIR PARA REDUCIR/ELIMINAR ESTOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN A IMPEDIR LA CURACIÓN DE LAS HERIDAS.

PRECAUCIONES

- Cerciórese de que el apósito cubra la herida por completo.
- Si el apósito se desgarra antes de o durante la aplicación, deséchelo y cámbielo por otro íntegro.
- Antes de retirarlo, asegúrese de que el apósito no esté adherido a la herida. Si se ha adherido a la herida o la piel, humidézcalo con agua o solución salina para que se desprenda.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea atentamente las **ADVERTENCIAS** y **PRECAUCIONES** antes de usar el producto.
2. Limpie la herida eliminando todo exceso de exudado y líquido; luego, seque adecuadamente la piel circundante.
3. Abra el envase del apósito.

APÓSITOS ADHESIVOS

1. Retire el papel que recubre la parte posterior del apósito adhesivo.
2. Centre la película barrera sobre la herida.
3. Sujete el borde expuesto del apósito adhesivo sobre la piel; luego, retire con cuidado el resto del papel.
4. Alise los bordes adhesivos del apósito sobre la piel.
5. Cambie el apósito según las necesidades, si se moja, se ensucia, pierde líquido o lo indica un profesional sanitario autorizado.
6. Para retirar el apósito, tome un extremo del borde adhesivo y tire delicadamente en el mismo sentido del vello, desprendiendo la venda de la herida.
7. Deseche el apósito usado.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Guárdese a temperatura ambiente y evítese el exceso de calor y humedad.

	MANTÉNGASE SECO
	MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ SOLAR

GARANTÍA

Los productos de DeRoyal tienen una garantía contra defectos de calidad y fabricación de 90 días a partir de la fecha de envío de DeRoyal. **LAS GARANTÍAS ESCRITAS DE DEROYAL SUSTITUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.**