



# Usein käytetyt symbolit

Luettelo DeRoyalin terveydenhuollon laitteiden pakkauksissa ja merkinnöissä toistuvista symboleista



sivu 1

symboli	selite	viittaus standardiin	standardin otsikko
	Ilmoittaa valmistajan luettelonumeron, jonka avulla terveydenhuollon laite voidaan tunnistaa.	ISO 15223-1, lauseke 5.1.6	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Luettelo- tai mallinumero</b>		ISO 7000-2493	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa valmistajan eränumeron, jonka avulla tuote-erä voidaan tunnistaa.	ISO 15223-1, lauseke 5.1.5	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Eränumero</b>		ISO 7000-2492	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa valmistajan sarjanumeron, jonka avulla yksittäinen terveydenhuollon laite voidaan tunnistaa.	ISO 15223-1, lauseke 5.1.7	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Sarjanumero</b>		ISO 7000-2498	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Terveydenhuollon laite on suojattava kosteudelta.	ISO 15223-1, lauseke 5.3.4	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Pidä kuivana</b>		ISO 7000-0626	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Terveydenhuollon laite on suojattava valolta.	ISO 15223-1, lauseke 53.2	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Pidä auringonvalolta suojattuna</b>		ISO 7000-0624	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa terveydenhuollon laitteen valmistajan.	ISO 15223-1, lauseke 5.1.1	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Valmistaja</b>		ISO 7000-3082	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa terveydenhuollon laitteen valmistuspäivän.	ISO 15223-1, lauseke 5.1.3	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Valmistuspäivä</b>		ISO 7000-2497	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Yritys, joka jakaa terveydenhuollon laitteet paikallisille käyttäjille.	ISO 15223-1, lauseke 5.1.9	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Jakelija</b>		ISO 7000-3724	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Yritys, joka tuo laitteet paikallisille käyttäjille.	ISO 15223-1, lauseke 5.1.8	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>E.U. Tuontiyritys</b>		ISO 7000-3725	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Reseptivalmiste Yhdysvalloissa.	21 CFR 801.15(c)(1)(i)F	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Reseptivalmiste</b>		21 CFR 801.109	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Terveydenhuollon laitetta ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut tai avattu.	ISO 15223-1, lauseke 5.2.8	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut</b>		ISO 7000-2606	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.














# Usein käytetyt symbolit

Luettelo DeRoyalin terveydenhuollon laitteiden pakkauksissa ja merkinnöissä toistuvista symboleista



sivu 2

symboli	selite	viittaus standardiin	standardin otsikko
	Tarkoittaa terveydenhuollon laitetta, joka voi rikkoutua tai vaurioitua, jos sitä ei käsitellä asianmukaisesti.	ISO 7000-0621, 2014-06-04	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
<b>Helposti särkyvä, käsittele varovasti</b>			Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
	Ilmaisee, että kyseessä on lääkinällinen laite, joka on varustettu akulla.	IEC 60417-5001B	Laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
<b>Akku</b>			
	Ilmoittaa, että terveydenhuollon laitteen tai terveydenhuollon laitteen pakkauksen valmistusmateriaalina on käytetty luonnonkumia tai kuivaa luonnonkumilateksia.	ISO 15223-1, lauseke 5.4.5	Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnöissä käytettävät graafiset symbolit.
<b>Sisältää luonnonkumia lateksia</b>			Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa, että laitteen rakennemateriaaleja tai sen pakkausta ei ole valmistettu luonnonkumista tai kuivasta luonnonkumilateksista.	ISO 15223-1, lauseke 5.4.5, Kieltoimerkin viitteenä liite B	Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnöissä käytettävät graafiset symbolit.
<b>Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia</b>			Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa terveydenhuollon laitteen viimeisen käyttöpäivän.	ISO 15223-1, lauseke 5.1.4	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Viimeinen käyttöpäivä</b>		ISO 7000-2607	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa, että käyttäjän on tutustuttava käyttöohjeisiin.	ISO 15223-1, lauseke 5.4.3	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Tutustu käyttöohjeisiin</b>		IEC 60601-1, taulukko D.1, kuvatunnus 11	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
		ISO 7000-1641	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
	Ilmoittaa, että käyttäjän on luettava käyttöohjeista tärkeitä varoitustietoja, kuten varoituksia ja varotoimia, joita ei syystä tai toisesta voi esittää terveydenhuollon laitteessa suoraan.	ISO 15223-1, lauseke 5.4.4	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Huomautus</b>		IEC 60601-1, taulukko D.1, kuvatunnus 10	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa, että terveydenhuollon laite on kertakäyttöinen tai tarkoitettu käytettäväksi vain yhdellä potilaalla yhden toimenpiteen aikana. HUOMAA: Synonyymit lausekkeelle "Älä käytä uudelleen" ovat "Kertakäyttöinen" ja "Saa käyttää vain kerran".	ISO 15223-1, lauseke 5.4.2	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Ei saa käyttää uudelleen</b>		ISO 7000-1051	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Katso käyttöopas.	IEC 60601-1, taulukko D.2, kuvatunnus 10	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
<b>Noudata käyttöohjeita</b>			
	Osoittaa eurooppalaista teknistä vaatimustenmukaisuutta.	765/2008/EY 768/2008/ EY MDD 93/42/ETY artiklat 4,11,12,17, liite II)	Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevat vaatimukset; lääkintälaitedirektiivi.
<b>CE-merkintä</b>			
	Tarkoittaa sitä, että laite täyttää Yhdistyneen kuningaskunnan tekniset vaatimukset.	Asetus 765/2008	Säädös, jossa esitetään tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevat vaatimukset.
<b>UKCA-merkintä</b>			



# Usein käytetyt symbolit

Luettelo DeRoyalin terveydenhuollon laitteiden pakkauksissa ja merkinnöissä toistuvista symboleista



sivu 3

symboli	selite	viittaus standardiin	standardin otsikko
	Ilmoittaa valtuutetun edustajan Euroopan yhteisössä.	ISO 15223-1, lauseke 5.1.2	Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnöissä käytettävät graafiset symbolit.
<b>Valtuutettu edustaja Euroopassa</b>			Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa terveydenhuollon laitteen turvallisen altistuksen lämpötilarajat.	ISO 15223-1, lauseke 5.3.7	Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnöissä käytettävät graafiset symbolit.
<b>Säilytyslämpötila-alue</b>		ISO 7000-0632	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa terveydenhuollon laitteen turvallisen altistustemperatuurialueen.	ISO 15223-1, lauseke 5.3.5	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Säilytyslämpötilan alaraja</b>		ISO 7000-0534	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa terveydenhuollon laitteen turvallisen altistustemperatuurin ylärajan.	ISO 15223-1, lauseke 5.3.6	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Säilytyslämpötilan yläraja</b>		ISO 7000-0533	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Ilmoittaa terveydenhuollon laitteen turvallisen altistuksen kosteusalueen.	ISO 15223-1, lauseke 5.3.8	Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnöissä käytettävät graafiset symbolit.
<b>Kosteusrajoitus</b>		ISO 7000-2620	Laitteistoissa käytettävät graafiset symbolit.
	To indicate the acceptable upper and lower limits of atmospheric pressure for transport and storage.	ISO 15223-1, Clause 5.3.9	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Atmospheric Pressure</b>		ISO 7000-2621	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
	Terveydenhuollon laitetta ei saa steriloida uudelleen.	ISO 15223-1, lauseke 5.2.6	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Ei saa steriloida uudelleen</b>		ISO 7000-2608	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Terveydenhuollon laitetta ei ole steriloitu.	ISO 15223-1, lauseke 5.2.7	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Steriloimaton</b>		ISO 7000-2609	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Terveydenhuollon laite on steriloitu.	ISO 15223-1, lauseke 5.2.1	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Steriloitu tuote</b>		ISO 7000-2499	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.
	Terveydenhuollon laite on steriloitu säteilyttämällä.	ISO 15223-1, lauseke 5.2.4	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Steriloitu säteilyttämällä</b>		ISO 7000-2502	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset.



# Usein käytetyt symbolit

Luettelo DeRoyalin terveydenhuollon laitteiden pakkauksissa ja merkinnöissä toistuvista symboleista



sivu 4

symboli	selite	viittaus standardiin	standardin otsikko
	Terveydenhuollon laite on steriloitu aseptisin menetelmin.	ISO 15223-1, lauseke 5.2.2	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Steriloitu aseptisin menetelmin</b>		ISO 7000-2500	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
	Terveydenhuollon laite on steriloitu etyleenioksidilla.	ISO 15223-1, lauseke 5.2.3	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Steriloitu etyleenioksidikäsitellyllä</b>		ISO 7000-2501	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
	Terveydenhuollon laite on steriloitu höyryllä tai kuivalämpömenetelmällä.	ISO 15223-1, lauseke 5.2.5	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Höyry- tai lämpösteriloitu</b>		ISO 7000-2503	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
	Terveydenhuollon laitteeseen saattaa liittyä biologisia riskejä.	ISO 15223, lauseke 5.4.1	Lääketieteelliset laitteet - Symbolit, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen kanssa - Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Biologisia riskejä</b>		ISO 7000-0659	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
	Any terminal which is intended for connection to an external conductor for protection against electric shock in case of a fault, or the terminal of a protective earth (ground) electrode.	IEC 60417-5019	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit. Ilmaisee, että laitteessa on luokan I suojamaadoitusliitäntä.
<b>Suojamaa; suojamaadoitus</b>			
	Kaksinkertaisesti eristetty laite	IEC 60417-5172	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
<b>Kaksinkertaisesti eristetty laite</b>			
	Luokan III laite on tarkoitettu käytettäväksi erillisen SELV-tehonlähteen kanssa. SELV-tehonlähteen jännite on riittävän matala, joten käyttäjän joutuminen kosketuksiin sen kanssa tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ei aiheuta sähköiskun vaaraa.	IEC 60417-5180	Laitteessa käytettävät graafiset symbolit, jotka osoittavat, että laite täyttää luokkaa III koskevat turvallisuusvaatimukset standardin IEC 61140 mukaisesti: Suojaus sähköiskulta – Asennusten ja laitteiden yhteiset ominaisuudet.
<b>EE, luokka III</b>			
	Tyypin B sovellettu osa, joka täyttää standardin IEC 60601-1 vaatimukset.	IEC 60417-5840	Lääkinnällinen sähkölaite - Osa 1: Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvyille.
<b>Tyypin B sovellettu osa</b>		IEC 60878	
		IEC 60601-1	
	Tyypin BF sovellettu osa	IEC 60417-5333	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
<b>Tyypin BF sovellettu osa</b>			



# Usein käytetyt symbolit

Luettelo DeRoyalin terveydenhuollon laitteiden pakkauksissa ja merkinnöissä toistuvista symboleista



sivu 5

symboli	selite	viittaus standardiin	standardin otsikko
	Sähkölaitteen kotelon suojausluokitus. • Suojaa kiinteiltä esineiltä > 12,5 mm • Suojaa vesisuihkulta enintään 15° pystysuunnasta	IEC 60529*  *(ei viitenumeroa standardin 60601-1 [2005] s. 645 mukaan)	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
<b>IP-luokka, kansainvälinen uojuusluokkamerkintä</b>			
	Magneettikuvaus turvallinen	ASTM F2503	Terveydenhuollon laitteiden ja muiden laitteiden turvallisuusmerkintöjä koskevat käytännöt magneettikuvausympäristössä.
<b>MK-turvallinen</b>			
	Magneettikuvaus ehdollinen.	ASTM F2503	Terveydenhuollon laitteiden ja muiden laitteiden turvallisuusmerkintöjä koskevat käytännöt magneettikuvausympäristössä.
<b>MK-ehdollinen</b>			
	Magneettikuvaus vaarallinen.	ASTM F2503	Terveydenhuollon laitteiden ja muiden laitteiden turvallisuusmerkintöjä koskevat käytännöt magneettikuvausympäristössä.
<b>MK-vaarallinen</b>			
	Defibrillointisuojuattu.	IEC 60417-5336	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit. Tyypin CF liitännäosa.
<b>Defibrillointisuojuattu</b>			
	Ilmaisee, että osan suojaus sähköiskulta on korkea standardin IEC 60601-1 vaatimusten mukaisesti.	IEC 60601-1 IEC 60878	Lääkinnällinen sähkölaite - Osa 1: Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvyille.
<b>EE, tyyppi CF</b>			
	Ilmaisee, että vaaditaan erillinen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys.	EN 50419	Terveydenhuollon laitteiden ja muiden laitteiden turvallisuusmerkintöjä koskevat käytännöt magneettikuvausympäristössä.  Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi
<b>WEEE</b>			
	Ionisoimaton sähkömagneettinen säteily.	IEC 60417 REF 5140	Terveydenhuollon laitteiden ja muiden laitteiden turvallisuusmerkintöjä koskevat käytännöt magneettikuvausympäristössä.
<b>Ionisoimaton säteily</b>			
	Ilmoittaa, että rakennemateriaalit eivät sisällä ftalaatin pehmitte DEHP:tä.	BS EN 15986 Liite B	Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkinnöissä käytettävä symboli – Ftalaatteja sisältävien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden merkintöjä koskevat vaatimukset.
<b>Ei sisällä DEHP:tä</b>			
	Tarkoittaa, että tuote on terveydenhuollon laite tai tarvike.	ISO 15223 – 1, lauseke .7.7	Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet – Kuvatunnukset, joita käytetään valmistajan toimittamien tietojen yhteydessä – Osa 1: Yleiset vaatimukset.
<b>Terveydenhuollon laitteiden ja muiden laitteiden</b>			


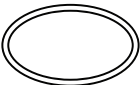
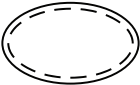





# Usein käytetyt symbolit

Luettelo DeRoyalin terveydenhuollon laitteiden pakkauksissa ja merkinnöissä toistuvista symboleista



sivu 6

symboli	selite	viittaus standardiin	standardin otsikko
 Yksittäinen steriili sulkujärjestelmä	Ilmaisee yksittäistä steriiliä sulkujärjestelmää.	ISO 7000-3707	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
 Steriili kaksoissulkujärjestelmä	Ilmaisee kahta steriiliä sulkujärjestelmää.	ISO 7000-3704	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
 Yksittäinen steriili sulkujärjestelmä sisäpuolisella suojapakkauksella	Ilmaisee yksittäistä steriiliä sulkujärjestelmää sisäpuolisella suojapakkauksella.	ISO 7000-3708	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
 Yksittäinen steriili sulkujärjestelmä sisäpuolisella suojapakkauksella	Ilmaisee yksittäistä steriiliä sulkujärjestelmää sisäpuolisella suojapakkauksella.	ISO 7000-3709	Lääketieteellisissä laitteissa käytetyt graafiset symbolit.
 Benchmark-tuotesertifiointi	Benchmark-merkki on BSI:n omistama ja hallinnoima rekisteröity sertifiointimerkki.	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa
 Accreditation Recognition Mark	Compliance with AS/NZS (Australia/New Zealand) requirements	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa